

HyCyte™ 成人骨髓间充质干细胞去外泌体专用培养基

Human Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells (H BMSCs) Growth Medium Without EXO

货号: BMHX-G101E

规格: 500 mL/Kit

产品组分

组分	规格	保存条件	有效期
H BMSCs Basal Medium	440 mL	2~8℃, 避光	12 months
HyCyte™无外泌体胎牛血清	50 mL	-20℃	24 months
Penicillin-Streptomycin 双抗	5 mL	-20℃	12 months
Glutamine 谷氨酰胺	5 mL	-20℃	12 months

NOTE: 产品冰袋冷藏运输, 所有试剂无菌分装可直接配制使用。

配制方法: FBS置于2~8℃融解。双抗和谷氨酰胺室温融解。将FBS、双抗和谷氨酰胺全部加入Basal Medium后, 混匀即为完全培养基, 可直接使用。完全培养基保存条件: 2~8℃, 避光; 配制后有效期: 3 months。

产品描述

HyCyte™ 成人骨髓间充质干细胞去外泌体专用培养基由Cas9X海星生物技术团队精心优化, 将成人骨髓间充质干细胞完全培养基中的血清成分, 通过超速离心和多次过滤, 去除其中的外泌体, 并良好地保留了血清中的营养成分, 适用于干细胞的培养。使用本产品可获取丰富的、高纯度的外泌体。

质检标准

pH: 7.2~7.4


内毒素含量: < 10 EU/mL

生物安全: 细菌、真菌、支原体检测阴性

性能测试: 通过细胞培养测试

注意事项

本产品仅用于科研实验, 不可用于临床治疗。使用产品时应注意无菌操作, 避免污染。

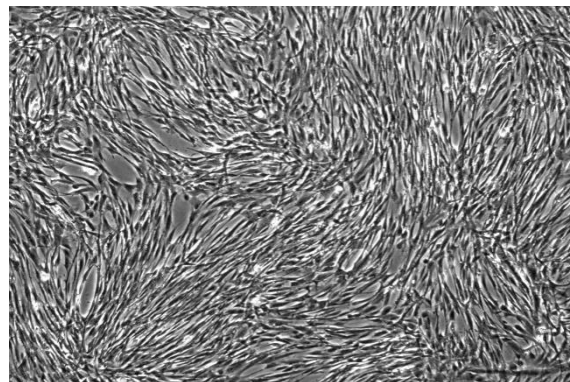

成人骨髓间充质干细胞-40×

为科研加速, 为工业赋能!



关注海星公众号



关注海星视频号



为科研加速，为工业赋能！

CRISPR/Cas9细胞基因编辑

载体构建/病毒包装 PDO类器官/动物模型CDX

稳转细胞株 HyCyte™干细胞/原代细胞 HyCyte™培养试剂盒



关注海星公众号



关注海星视频号

