


产品使用说明书

人肾透明细胞癌皮肤转移细胞

CAKI-1

货号：TCH-C147

规格：1×10⁶ cells/T25 培养瓶

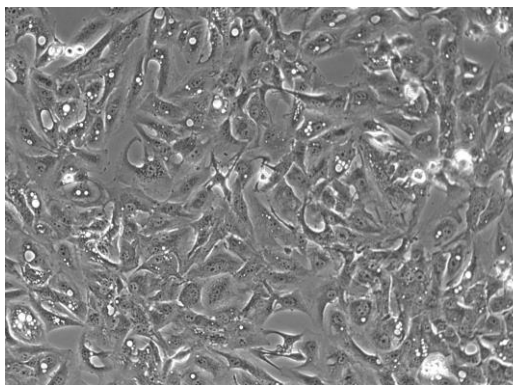

Caki-1 细胞的超微结构中包含许多微绒毛、少许微丝、许多小线粒体、充分发育的高尔基体、内质网、许多脂滴和多层体，次级溶酶体；目前，没有在 Caki-1 细胞内发现病毒颗粒。

产品说明

细胞名称	人肾透明细胞癌皮肤转移细胞
细胞简称	CAKI-1
种属来源	人
组织来源	肾
细胞形态	上皮细胞样
生长特性	贴壁生长
培养体系	培养体系：McCoy's 5A + 10%FBS（胎牛血清）+ 1% P/S 推荐使用海星配套 CAKI-1 细胞专用培养基，货号：TCH-G147
消化时间	胰蛋白酶-EDTA 消化液（0.25%）含酚红（胰酶）在 37°C 消化 2-3min。 注：不同品牌胰酶不同细胞密度消化时间略有区别，以大部分细胞变圆脱落为准。
注意事项	常温细胞首次收货建议 1: 2 传代
传代比例	1: 2-1: 4，每 2-3 天换液一次
培养环境	气相：95%空气+5%二氧化碳，温度：37°C
冻存条件	冻存条件：60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO 推荐海星 HyCyte® 一步冻存液（即用型、无血清、无需程序降温），货号：GUCP-R201 保存条件：液氮储存
安全性	所有肿瘤细胞和病毒转染的细胞均视为有潜在的生物危害性，建议在二级生物安全台内操作，并做好个人防护。
用途	仅供科研使用

MX319A5-20250205

为科研加速，为工业赋能！



海星商城二维码



公众号二维码

